



Ritter®

PARA USO MÉDICO

Sillón de procedimientos

230



La asistencia sanitaria está cambiando. ¿Está usted cambiando con ella?


A día de hoy, casi la mitad de todos los procedimientos realizados en los Estados Unidos se llevan a cabo en consultas.¹ Y, con los avances tecnológicos y en los campos de la anestesia y la gestión del dolor, se espera que el número de procedimientos ambulatorios siga en aumento.² Está preparado su centro para esta migración de la atención sanitaria?

El **sillón de procedimientos Ritter® 230** está diseñado para ayudar a las organizaciones a desarrollar un flujo de procedimientos ambulatorios más eficiente, eficaz y ergonómico, comenzando por el elemento más importante de la sala de procedimientos: su sillón.


LOS PROCEDIMIENTOS EN CONSULTAS VAN EN AUMENTO

81 millones

Número de procedimientos realizados en 2023 en Estados Unidos¹

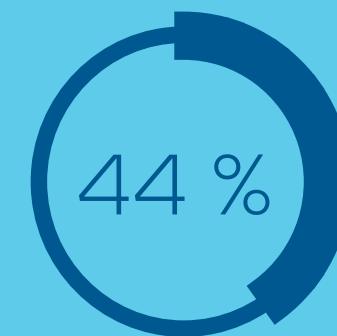

Casi la mitad de los procedimientos realizados en Estados Unidos se llevan a cabo en consultas.¹

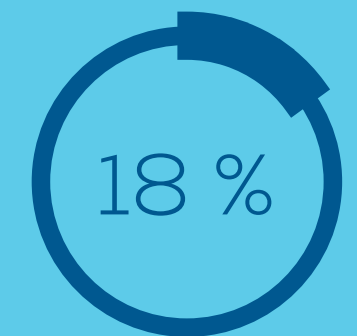

El aumento estimado del volumen de procedimientos en consultas para 2032²

Mejor posición de los profesionales durante los procedimientos en consultas

En Estados Unidos los profesionales sanitarios son uno de los colectivos con mayor riesgo de sufrir lesiones en el aparato locomotor. De hecho, los sanitarios tienen tres veces más probabilidades de sufrir accidentes laborales que los albañiles.³ Además, los estiramientos y el esfuerzo durante los procedimientos prolongados puede provocar lesiones por fatiga.

El movimiento del sillón debe ofrecer a los profesionales una visión clara de la zona del procedimiento y, al mismo tiempo, permitirles trabajar en una posición ergonómicamente correcta, tanto sentados como de pie.



POSICIONAMIENTO MÉDICO PRECISO

El sillón de procedimientos Ritter® 230 con regulación de altura, respaldo, reposapiés e inclinación se ha diseñado para que el profesional pueda colocar a los pacientes sin esfuerzo y de forma precisa para realizar numerosas intervenciones.



Posición genupectoral

Facilita el acceso a la parte inferior del cuerpo de los pacientes en posición prona.



Litotomía

Permite posicionar correctamente a los pacientes en posición supina para procedimientos en la parte inferior del cuerpo.



Posición horizontal elevada

Mejora tanto la accesibilidad a la cabeza, el cuello y el torso del paciente como la visibilidad de estas zonas.



Acceso al sillón Coloca al paciente en posición vertical para que se suba y baje del sillón.



Trendelenburg

Se utiliza como tratamiento para la hipotensión durante procedimientos y para posicionar a los pacientes durante procedimientos de la parte inferior del cuerpo.



ROTACIÓN

Gracias a la función opcional de rotación, los profesionales ya no tendrán que arrastrar pesados dispositivos alrededor del sillón o del paciente, bastará con mover al paciente para facilitar el acceso.



CONTROLES MANUALES ESTÁNDAR

Los controles manuales estándar se encuentran en una ubicación de fácil acceso para que ajustar la posición del sillón por comodidad del paciente sea más rápido y sencillo.



TOMACORRIENTES DOBLES

Los tomacorrientes dobles aptos para uso hospitalario situados a cada lateral del sillón permiten enchufar los accesorios que se utilizan durante los procedimientos médicos.

Una **comodidad** que agradecerán sus pacientes

El sillón de procedimientos Ritter® 230 se ha diseñado para aportar mayor comodidad y seguridad a los pacientes. Funciones como la posición de acceso al sillón les ayudan a subir más cómodamente al sillón de procedimientos. El diseño natural con forma de silla también reduce la presión que sienten los pacientes en la cabeza y el cuello. Una serie de accesorios de apoyo para el paciente brindan una mayor comodidad, al tiempo que reducen los movimientos durante el procedimiento.



La opción de tapicería lisa y ancha de 61 cm (24") ofrece mayor acceso al paciente.



Accesorios



Sistema de reposabrazos ajustable
Rota y se bloquea en una de tres posibles posiciones



Control de pedal de estilo lineal
Ayuda a mantener el campo estéril



Reposabrazos con soportes articulados
Se acopla a un lateral del sillón y sostiene el brazo del paciente.



Bandeja para instrumentos con doble brazo
Diseñada para mantener los instrumentos y suministros cerca del paciente



Apoyabrazos para cirugías en la mano
Se acopla a uno u otro lado de la silla con una pata ajustable que aporta una mayor estabilidad



Correas de seguridad
Anchura y ubicación ajustables



Reposapiés de 61 cm (24") de ancho
Ofrece al paciente una superficie de apoyo más amplia



Paneles laterales de seguridad
Puede emplearse en posición vertical y horizontal



Apoyos articulados para las rodillas
Diseñado para proporcionar apoyo óptimo a las piernas y las rodillas.



Ruedas bloqueables
Añade 8,9 cm (3 1/2") a la altura del sillón



Pantalla de bloqueo de la visión
Se ajusta verticalmente y bloquea la línea de visión del paciente



Lámpara LED Ritter® 253
Disponible con soporte de sillón o portátil



Almohadilla facial
Proporciona mayor estabilidad para la cabeza y el cuello

OPCIONES DE COLOR

COLORES DE TAPICERÍA ESTÁNDAR

	Niebla 813
	Piedra 814
	Camino tranquilo 858
	Mineral de hierro 851
	Gris lunar 845
	Obsidiana 857
	Oasis 843
	Azul relajante 855
	Sueño 847
	Mineral 844
	Aguas curativas 848
	Jardín sombreado 853
	Cítrico 849
	Retiro de arena 850
	Cobre curativo 846
	Arándano 859
	Lino oscuro 856
	Café con leche 860
	Marrón oscuro 852
	Tierra oscuro 854

COLORES DE LA TAPICERÍA ULTRAFREE

	UltraFree Piedra 865
	UltraFree Camino tranquilo 868
	UltraFree Obsidiana 867
	UltraFree Puerto 861
	UltraFree Campo de trigo 862
	UltraFree Especia 863
	UltraFree Arándano 869
	UltraFree Lino oscuro 866
	UltraFree Café con leche 870
	UltraFree Rama 864

OPCIONES

Tomacorrientes: Doble, apta para uso hospitalario¹

Rotación: Permite 350 grados de rotación del sillón y añade 8,9 cm (3,5") a las alturas mínima y máxima del asiento

Tapicería lisa: 61 cm (24") de ancho

ACCESORIOS

Lámpara de exploración LED Ritter® 253

Control de pedal de estilo lineal

Reposapiés de 61 cm (24") de ancho

Sistema de reposabrazos ajustable (incluye brazos izquierdo y derecho)

Reposabrazos con soportes articulados

Apoyabrazos para cirugías en la mano

Apoyos articulados para las rodillas

Ruedas¹

Base de las ruedas^{1,2}

Correas de seguridad

Paneles laterales de seguridad

Carriles base

Bandeja para instrumentos con doble brazo

Percha IV

Sistema de drenaje para urología¹

Almohadilla facial

Pantalla de bloqueo de la visión

Cable de alimentación de 7,6 cm (3")

Bandeja para instrumentos con brazo oscilante, cubierta extensible

¹ No disponible en los modelos rotativos

² No compatible con el reposapiés de 61 cm (24") de ancho

SERVICIOS Y ASISTENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Vea las Especificaciones técnicas de la silla de procedimientos Ritter® 230.



ESCANEE EL QR PARA VER LAS ESPECIFICACIONES.

DISEÑO EN TIEMPO REAL DE MIDMARK

Nuestros expertos en diseño están listos para ayudarle en todo momento.



ESCANEE EL QR PARA VER EL VÍDEO.

SERVICIOS DE ENTREGA DE MIDMARK

Coordinación, entrega y montaje puntuales en todo momento.



ESCANEE EL QR PARA VER LAS OPCIONES.

SERVICIO DE REPARACIÓN

Explore los planes de asistencia y servicio disponibles y obtenga el nivel de cobertura que necesita para mantener sus equipos y dispositivos médicos en buen estado. Hay planes de mantenimiento e inspección periódicos, así como planes de garantía ampliada.



ESCANEE EL QR PARA OBTENER AYUDA.

FUENTES

¹ Consultado en noviembre de 2024: <https://clarivate.com/coronavirus-resources/?lid=d>
Consulte la pestaña "Impacto en el procedimiento médico"

² <https://www.ascfocus.org/ascfocus/content/articles-content/articles/2022/digital-debut/sg2-annual-report-projects-double-digit-asc-growth>

³ <https://www.bls.gov/charts/injuries-and-illnesses/number-and-rate-of-nonfatal-work-injuries-by-industry.html>



Conforme a la norma CARB 93120.2, fase 2, y a TSCA, sección VI

USGBC® y su logotipo son marcas comerciales propiedad de US Green Building Council® y se utilizan con autorización.

Los ejemplos de colores mostrados son una representación aproximada del material original. El color real podría variar ligeramente. Antes de realizar su pedido, le recomendamos que se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente de Midmark Customer Experience a través del 1.800.MIDMARK para solicitar una muestra.

Midmark es una empresa certificada según las normas ISO 13485 e ISO 9001. Algunos productos no están incluidos. Consulte la lista completa en: midmark.com/ISO

Para solicitar más información, póngase en contacto con el distribuidor de Midmark, o bien llame al teléfono: 1.800.MIDMARK

Si contacta desde fuera de Estados Unidos, llame al 1.937.526.3662 o visite nuestro sitio web: midmark.com.

© 2024 Midmark Corporation, Versailles, Ohio EE. UU.
Como parte del proceso de mejora, podrían realizarse cambios en los productos sin previo aviso.

007-10375-03 Rev. B1 (12/24)

Ritter®